


スピード止血 Y コネクター

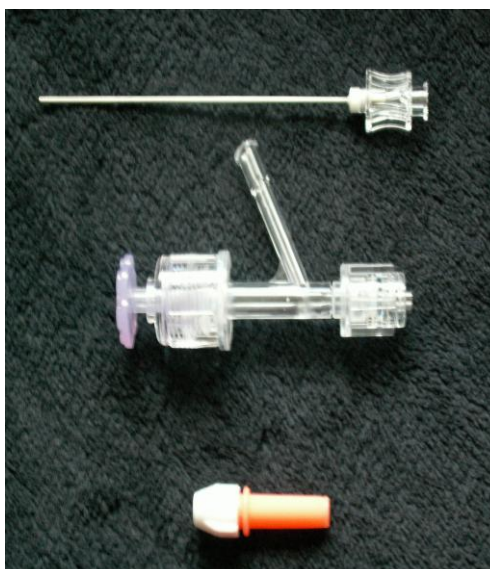

止血弁と固定弁の 2 個の弁の採用により P C I、P T A の手技をよりスムーズに行えます。

・止血弁を閉じた状態でガイドワイヤー (GW)、バルーンカテーテルを操作してもほとんど出血することなく操作できます。固めの弁を採用し、GW の血液付着をさらに軽減しました。

・手技中に固定弁でガイドワイヤー、バルーンカテーテルのシャフトを固定して他の作業が行えます。

・高さ 1 mm の滑り止めを採用。片手で止血弁の開け締めを可能にし、すばやい止血弁の戻りで、血液の漏れを最小限に抑えます。

Y コネクター最狭部 2.7 mm (8F)


挿入可能器具直径 2.5 mm (7.6F)

より素早い止血！

素早い弁の戻り！

固めの弁によりさらに血液漏れを少なく！！

滑り止め採用によるスピーディーな操作性！

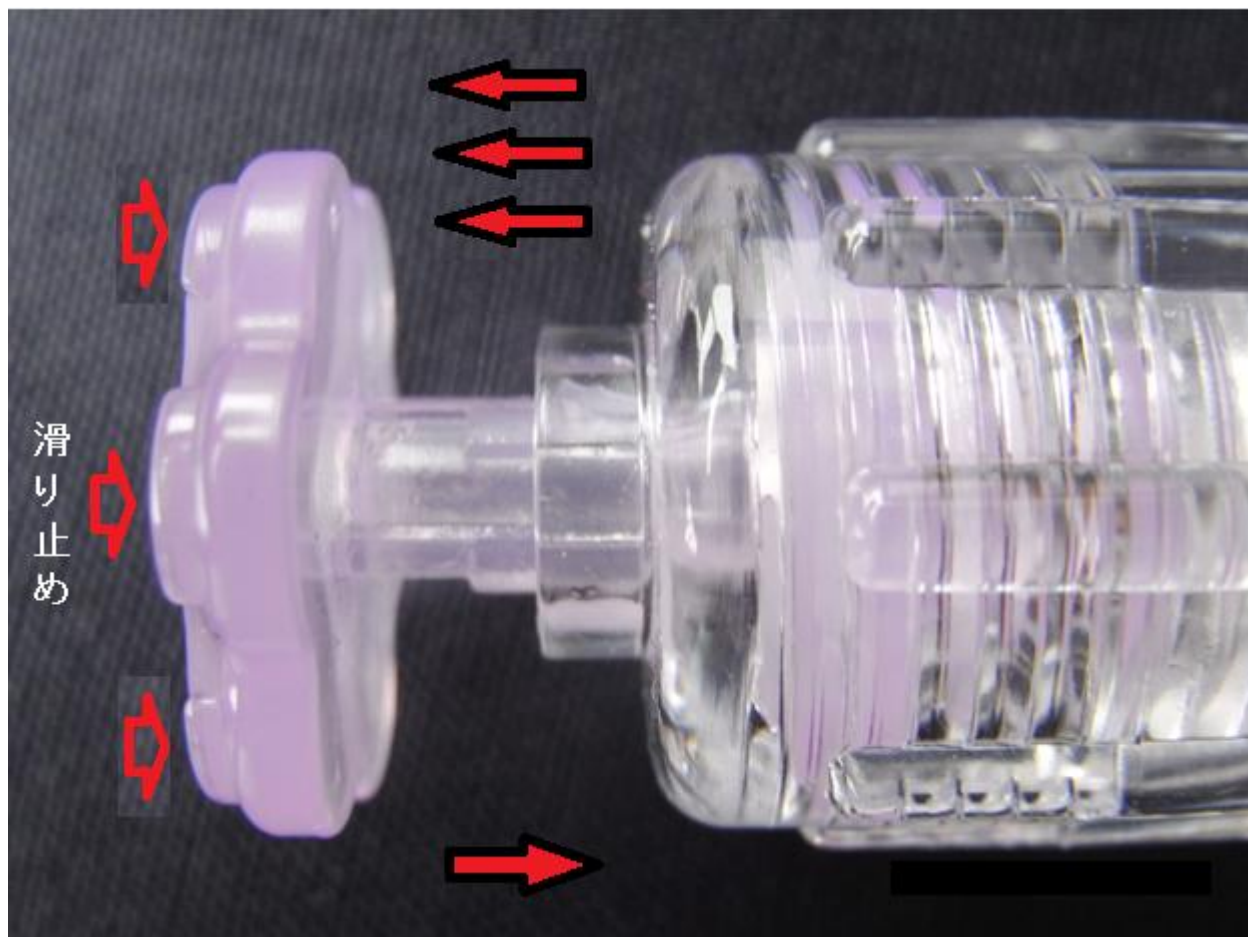



 滑り止め採用

⇒⇒⇒ クイックレスポンス
 ⇒⇒⇒ 素早い止血

	販売名	形式	医療機器届出番号
THC-I	THC Yコネクタ	バルーン拡張式血管 形成術向けカテーテル 用コネクタ	226AGBZX00068000

製造販売元：栃木精工株式会社
 栃木県栃木市平柳町2-1-5
 TEL:0282-27-1133 FAX:0282-27-1137

販売元：株式会社カルディオメド
 神奈川県相模原市緑区二本松 4-27-28-301
 TEL：042-855-6005 FAX：042-855-6006